


**Ребенок должен родиться
не только живым, но и здоровым!**

+ 100 000 ЗДОРОВЫХ ДЕТЕЙ ЕЖЕГОДНО

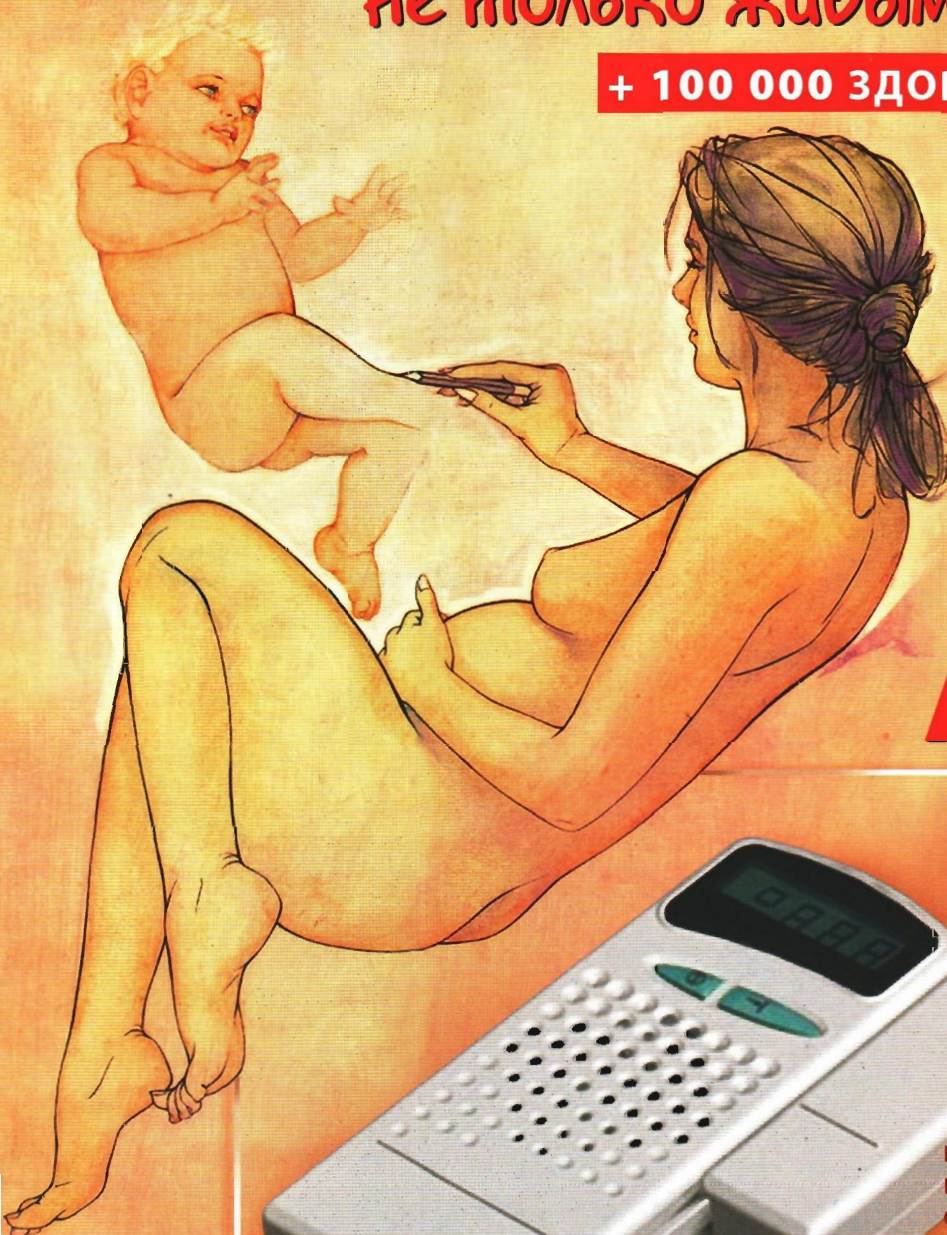

РЕГИСТРИРУЮЩИЙ
АНАЛИЗАТОР
ДОППЛЕРОВСКИЙ
СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
МАТЕРИ И ПЛОДА
МАЛОГАБАРИТНЫЙ

АДМП-02



Это современный недорогой скрининговый прибор, который позволяет в течение нескольких минут врачам и среднему медицинскому персоналу определить наличие сердцебиений плода, определить основные характеристики сердечного ритма, сравнить их с нормой и документировать результаты исследования. Приборы АДМП-02 функционально занимают промежуточное положение между фетальными мониторами и фетальными детекторами, а по цене близки к фетальным детекторам.

**По функциональным возможностям превосходит
все существующие мировые аналоги, обладает наилуч-
шим соотношением цена – качество.**

АДМП-02

**Прибор вследствие очень малой интенсивности
ультразвукового излучения
не имеет ограничений в применении**



- Определяет наличие сердцебиений плода и выводит на цифровой индикатор число сердечных сокращений (ЧСС) плода, начиная с 10-12 недель беременности.
- Записывает во внутреннюю память прибора 215 последовательных мгновенных значений ЧСС плода (~2 мин.) для последующего анализа и документирования (память на 35 пациенток, поддерживается дата и время обследования каждого пациента).
- Определяет основные характеристики сердечного ритма (базальную ЧСС, вариабельность, наличие акцелераций и децелераций), сравнивает их с нормой и выводит результаты на трехцветный индикатор (зеленый, желтый, красный).
- Сохраняет результаты обследования на компьютере и распечатывает протокол исследования.
- Распечатывает «чек» обследования с помощью мультипроцессорного блока обработки и регистрации.

Используется:

- в ФАП, в женских консультациях и врачами общей практики — при каждом посещении врача беременной, начиная с 10-12 недель беременности;
- во всех отделениях роддомов;
- бригадами «Скорой медицинской помощи» при приеме беременной;
- в других ЛПУ, где находятся беременные женщины,
- самими беременными.

63861 > D:\МУ_ОС\Разработка\АДМП02\Справка с РС\ADMP_02_1-20-Inv\RESULT\17_5_2004_ (14_30_9).htm

Файл Печать Принтер Обмен Настройки Справка

ПРОТОКОЛ ИССЛЕДОВАНИЯ 17.05.2004 13:09

№ 14 ФИО: Новикова Е.А.

Год рождения: 1972

№ полиса: 1065

Срок (нед.): 38

Результат: Не выявлено признаков внутриутробного страдания плода.

Врач: Иванов И. И.

РЕКОМЕНДАЦИИ

Риск неблагоприятного исхода для плода минимален. Повторные исследования через 10-14 дней.

Выбрана запись № 14 Изменено

СТАТИСТИКА

БАЗАЛЬНАЯ ЧСС	138
ВАРИАБЕЛЬНОСТЬ	14
АКЦЕЛЕРАЦИИ	
количество	1
амплитуда	67
ДЕЦЕЛЕРАЦИИ	
медленных	0
быстрых	0

ГРАФИК

см/мин

1 2 3 MAX

220
200
180
160
140
120
100
80
60
40

0 0,5 1 мин

Протокол обследования содержит:

- дату и время обследования;
- фамилию врача;
- фамилию пациентки;
- год рождения пациентки;
- срок беременности;
- значение базальной ЧСС;
- вариабельность ЧСС;
- число акцелераций и децелераций;
- график ЧСС;
- рекомендации врача.

Компьютерный протокол исследования

Широкое применение прибора в медицинской практике, в комплексе с другими методами позволит:

- улучшить показатели перинатальной и материнской заболеваемости и смертности;
- обеспечить увеличение доли рождения здоровых детей;
- сократить затраты на выхаживание и лечение родившихся детей;
- снизить вероятность совершения врачебной ошибки и судебных преследований;
- создать более комфортные условия труда врачей.